

Inspiration *Elite*



Nebulisator- och kompressorsystem Inspiration Elite

Inspiration Elite är ett luftkompressorsystem för nebulisatorer och drivs med nätström. Det är avsett som källa för tryckluft för medicinskt bruk för användning inom hemsjukvården. Det används med Sidestream tryckluftsnebulisator för att producera aerosolpartiklar av ett läkemedel för andningsterapi för såväl barn som vuxna.



Sidestream®

High Performance Nebulizer

• Adult Mask



• Child Mask





• Mouthpieces



Sidestream can be used to nebulize all commonly prescribed bronchodilators for respiratory conditions.

- Fast, accurate drug delivery every time.
- 80% of Sidestream's output is small enough (less than 5 microns) to reach the lungs.
- Available in reusable and disposable versions with identical performance.
- Reusable Sidestream can be sterilised and will give consistent performance for a year.

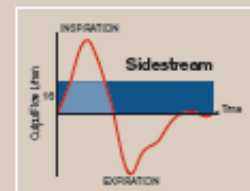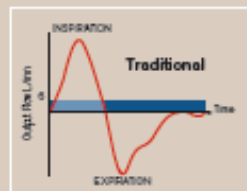

In the graphs above, the Sidestream and traditional nebulizers are compared. Both nebulizers run from the Peria-neb (8 L/min). The increased output flow from the Sidestream (2.6 L/min) is due to an innovative Venturi mechanism in the top of the Sidestream.

Teknisk information

MODELL	INSPIRATION ELITE
SPÄNNING	230 volt, 50 Hz, 0,55 A
GENOMSNITTLIG EFFEKT	50 W
TERMISKT ÖVERBELASTNINGSSKYDD	Nominellt 150 °C
STICKPROPP	2-polig Eurostickpropp (rund)
SÄKRING	2,5 A, trög
VIKT	1,5 kg
MÅTT (HUVUDENHET)	14 cm (B) X 9 cm (H) X 19 cm (D)
ARBETSSÄTT	30 minuter PÅ / 30 minuter AV
MAX A-VIKTAD LJUDNIVÅ	60 dB(A)
PRESTANDA	
MEDELFLÖDE	5,4 liter per minut vid 0,7 bar
MAXTRYCK	2,3 bar
GENOMSNITTLIG NEBULISERINGS-HASTIGHET	0,30 ml/min.
PARTIKELSTORLEK D _v (50)	3,17µm
DRIFTSFÖRHÅLLANDEN	
TEMPERATUR	10 °C till 35 °C (50°F till 104°F)
LUFTFUKTIGHET	10 % till 95 % relativ fuktighet
DRIFTSTRYCK	0,7 bar
FÖRVARINGS-/TRANSPORTFÖRHÅLLANDEN	
TEMPERATUR	-25 °C till +70 °C (-13°F till 158°F)
LUFTFUKTIGHET	10 % till 95 % relativ fuktighet
LUFTTRYCK	700 till 1 060 hPa

Nebuliseringshastighet och partikelstorlek är baserade på användning av SideStream och saltlösning.

Dolema AB förbehåller sig rätten att ändra i denna broschyr utanföregående meddelande.

är varumärken tillhöriga